

PL

# Blephademodex

**Sterylnie chusteczki  
oczyszczające,  
bez środków konserwujących**

## Przeznaczenie:

BLEPHADEMODEX przeznaczony jest do:

- codziennej higieny powiek w przypadku infekcji nużeńcami *Demodex*,
- do łagodzenia objawów infekcji powiek lub stanów zapalnych spowodowanych przez nużeńce (*Demodex*)

Nużeniec jest najczęstszym mikroskopijnym pasożytem skóry. Zakażenie nim prowadzi do stanu zapalnego powiek.

Nużeniec nie jest usuwany podczas zwykłych, codziennych zabiegów oczyszczających. Obecność łupieżu cylindrycznego (złogów wokół podstawy rzęs) wyraźnie wskazuje na zakażenie nużeńcem.

BLEPHADEMODEX oczyszcza powieki i rzęsy ze strupków (osadów), łupieżu, zanieczyszczeń oraz czynników zakaźnych. BLEPHADEMODEX łagodzi objawy związane z zakażeniem nużeńcami (*Demodex*), takie jak swędzenie, pieczenie, suchość i stan zapalny powiek, przez usunięcie pasożytów.

Zaczerwienienie brzegów powiek, uczucie podrażnienia i obecności ciała obcego w oku ulegają zmniejszeniu.

BLEPHADEMODEX zawiera hialuronian sodu, naturalny środek nawilżający skórę, który ma właściwości kojące, łagodzące i regenerujące skórę wrażliwą.

BLEPHADEMODEX zawiera Terpinen-4-ol i jest dobrze tolerowany, ponieważ nie zawiera detergentów i konserwantów.

BLEPHADEMODEX nie zawiera środków zapachowych, dlatego może być wyczuwalny naturalny zapach jego składników. Znika on w ciągu kilku minut.

Ze względu na zawartość naturalnych ekstraktów roślinnych kolor chusteczek (roztworu) może się różnić.

## Dawka:

Objawy łagodne do umiarkowanych: stosować raz dziennie, najlepiej wieczorem przez 4 tygodnie.

Objawy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego: stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem przez 4 tygodnie.

Personel medyczny (lekarz prowadzący) może dostosować dawkowanie i czas trwania leczenia w zależności od nasilenia objawów.

Zgodnie z innymi, podobnymi metodami leczenia zapalenia powiek, lekarz prowadzący może zalecić jednoczesne stosowanie sztucznych łez.

BLEPHADEMODEX można stosować od 18 roku życia.

## Instrukcja użycia:


**W przypadku noszenia soczewek kontaktowych** należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu BLEPHADEMODEX.

Otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę.

Umieścić ściereczkę na palcu wskazującym i zawinąć ją.

Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs.

Ostrożnie masować powieki małymi, okrężnymi ruchami, usuwając wszelkie strupki (zanieczyszczenia), łupież czy wydzieliny.

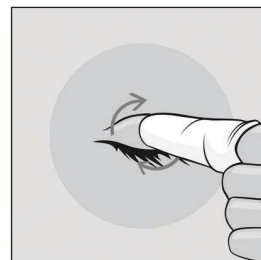

Czynność powtórzyć wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki. Należy trzymać oko zamknięte przez 15 sekund po aplikacji.

BLEPHADEMODEX jest nietłusty i nie wymaga spłukiwania po użyciu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt do stosowania wyłącznie na skórę.

Unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka, ponieważ może to wywołać odczucie pieczenia.

W przypadku kontaktu z powierzchnią oka spłukać sterylną wodą lub roztworem soli fizjologicznej.

BLEPHADEMODEX jest produktem sterylnym, **wyłącznie do jednorazowego użycia**.

Użytej chusteczki nie należy stosować ponownie, ponieważ może to zmniejszać skuteczność i zwiększać ryzyko zakażenia.

Nie stosować chusteczki, jeśli saszetka jest otwarta lub uszkodzona.

Nie stosować po upływie terminu ważności jednoznacznie określonego na opakowaniu zewnętrznym oraz na saszetce. Termin ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, przechowywanego prawidłowo.

Każdą chusteczkę należy po zastosowaniu wyrzucić do domowego pojemnika na odpadki. Jeśli objawy nasilają się lub wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać używania produktu BLEPHAEMODEX i skontaktować się z personelem medycznym.

#### **Przeciwwskazania:**

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat, ponieważ żadne dane nie są dostępne.

Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ponieważ nie ma żadnych dostępnych danych.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

#### **Przechowywać w temperaturze od 8 do 25°C.**

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

#### **Możliwe działania niepożądane:**

Podczas stosowania produktu zgłaszano następujące zdarzenia: uczucie pieczenia po użyciu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, okulistą, farmaceutą lub producentem.

#### **Opis produktu:**

Sterylnie chusteczki nasączone płynem  
Płyn zawiera: PEG-8, Polisorbat 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 glicerydy kaprylowe / kaprynowe - makrogol 6 glicerol kaprylo-kaprynowy, hialuronian sodu, fosforan dipotasowy, diwodorofosforan potasu, woda oczyszczona.

**Data aktualizacji instrukcji użycia:**  
**Grudzień 2017**



**Wytwórca**

**Laboratoires THEA**

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja



Przechowywać w temperaturze od 8 do 25°C



Wyrób jednorazowego użytku



Nie stosować, gdy opakowanie (saszetka) jest uszkodzone



Wyrób jałowy (sterylny), wysterylizowany radiacyjnie



Do wyrobu dołączona jest instrukcja użycia



Uwaga



Termin przydatności do użycia



Numer serii



0459

Théa